

MULTIPORT™ TERMINAL UNITS

НАСТЕННЫЕ КОНСОЛИ M-GB

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ M-GB09, СОСТАВ:

- Подача медицинских газов, сжатого воздуха, вакуума к кровати пациента
- Подача электричества, слаботочных и аудио-видео сигналов
- Удобная установка на полках, рельсах, инфузионных стойках необходимого оборудования для жизнеобеспечения пациента



- Специальный четырехсекционный несущий анодированный алюминиевый профиль 250x116 мм длиной согласно проекта.
- Передние панели и боковые крышки из анодированного алюминия или покрашены порошковой краской цветами RAL.
- Два рельса 10x25 мм для навесного оборудования.
- Источники отраженного палатного, направленного и ночного освещения.
- Клапаны медгазов, электророзетки, гнезда информационных сигналов, мониторы контроля давления медгазов.
- Клапаны медгазов и электророзетки могут устанавливаться любых национальных стандартов.





ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ:

- Полка для монитора.
- Полка для монитора с выдвижным ящиком.
- Инфузионная стойка для шприц-насосов, инфузионных насосов и капельниц.
- Подвесной шкафчик с полкой из нержавеющей стали.
- Источник направленного света для осмотра.
- Межкроватьная телескопическая ширма.
- Флоуметр с увлажнителем кислорода прямого подключения.
- Система отсоса от централизованного вакуума (или от сжатого воздуха) с сосудами сбора секретов и силиконовым шлангом.
- Держатели катетеров и другого навесного оборудования.
- Пульт вызова медперсонала и управления источниками освещения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- Для небольших операционных
- Для наркозных
- Для палат интенсивной терапии и реанимации




- Для палат новорожденных
- Для палат экстренной помощи
- Для процедурных и перевязочных



Возможность объединения консолей в неразрывный ряд для общих залов реанимации, интенсивной терапии

КОНСОЛИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА M-G B09H

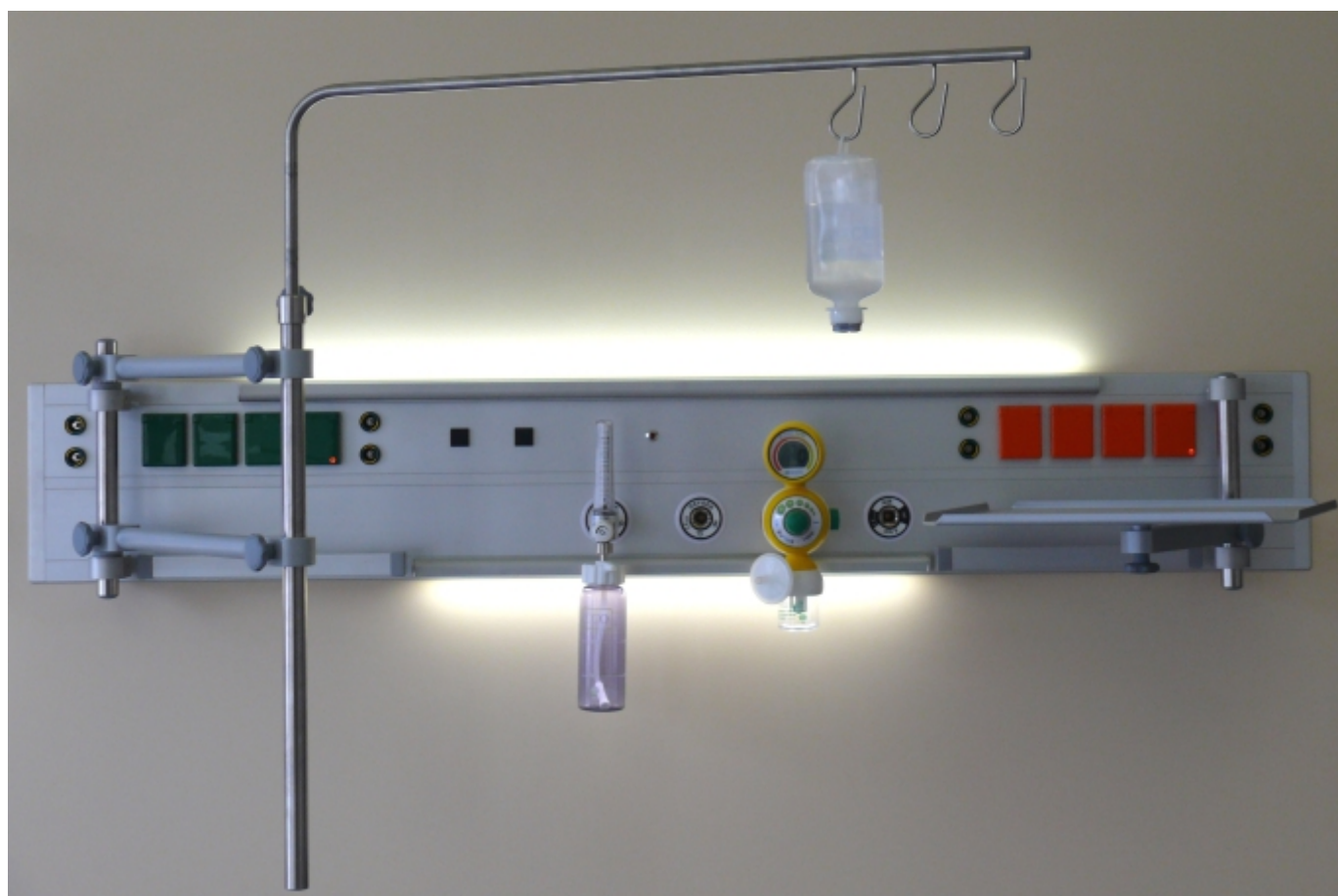

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Консоль выполнена для скрытого монтажа.
- Для палат улучшенного дизайна и комфорта.
- Подача медицинских газов, электричества и информационных сигналов.
- Светильники LED отраженного, ночного освещения и для чтения.
- Беспроводной пульт для вызова медперсонала и управления источниками света.
- Возможность оперативного изменения состава принадлежностей.
- Длина консолей выбирается исходя из количества клапанов медгазов, розеток и гнезд информационных сигналов.
- Корпус консоли - анодированный двухсекционный алюминиевый профиль.



Стандартные цвета передних панелей:

RAL 3004

RAL 5015

RAL 6018

RAL 6027

Анодированного
алюминия
(светло-серебристый)

Цвет профиля:

Анодированного
алюминия
(светло-серебристый)

Цвет полок:

RAL 9006

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНСОЛИ M-G B09W



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Для обслуживания двух койко-мест в реанимации, интенсивной терапии с максимальной экономией площади.
- Подача медицинских газов, электричества и информационных сигналов отдельно для каждого пациента.
- Инфузионные стойки для инфузионных шприц-насосов и капельниц.
- Освещение места пациента, верхним и нижним светильниками отраженного света.
- Клапаны медгазов и электророзетки могут устанавливаться любых национальных стандартов.

Цвета панелей:

RAL 3004

RAL 5015

RAL 6018

RAL 6027

Цвет корпуса:

RAL 1013

RAL 9010

RAL 9006

Цвет полок:

RAL 9006

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНСОЛИ M-G B09V ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

ЭКОНОМИЧНЫЙ ВАРИАНТ НАСТЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ
ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ МЕСТЕ УСТАНОВКИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ ДЛЯ:


- палат интенсивной терапии реанимации
- палат общей терапии и экстренной помощи.
- для процедурных и перевязочных

В КОНСОЛЯХ МОГУТ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ:

- до 8-ми клапанов медгазов и система AGSS
- до 8-ми электророзеток и 4-ех гнезд выравнивания потенциалов
- источник света для чтения LED до 14 W со шнуровым выключателем
- двойной разъем RJ45
- место для модули вызова медперсонала

КОНСОЛИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКЗЧИКА КОМПЛЕКТУЮТСЯ:

- рельсами для навесного оборудования
- полкой для мониторов и другого оборудования
- держателем капельниц
- держателем инфузоматов с креплением на рельс
- источником фокусированного света с креплением на рельс
- увлажнителем кислорода с флоуметром
- системой отсоса с регулятором вакуума, сосудами сбора секретов

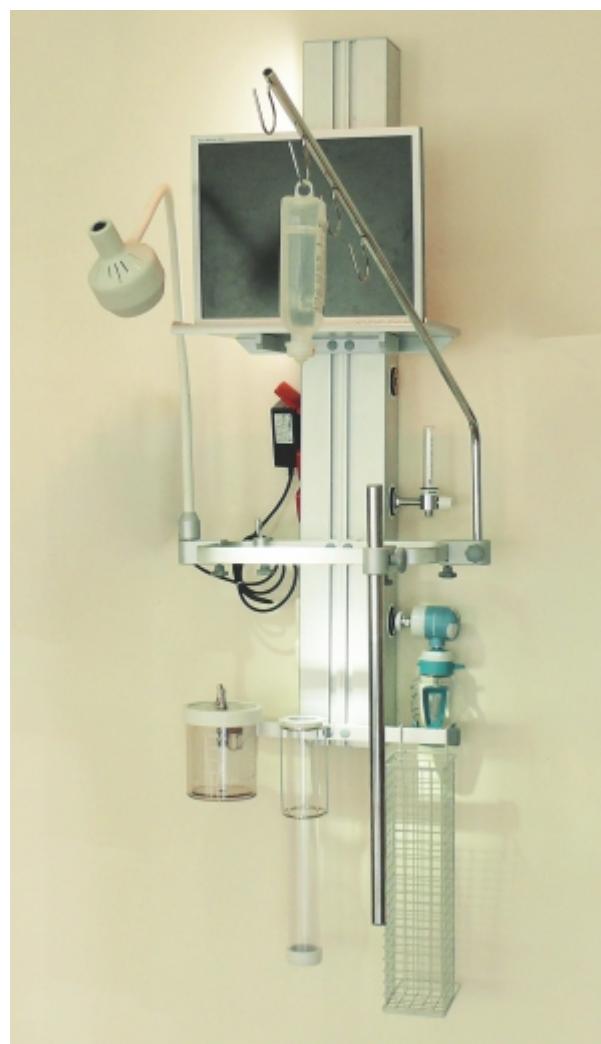

Длина до 2000 мм, ширина 146 мм, глубина 102 мм
Корпус консоли (профиль) и передние панели консолей - анодированы (цвет светло-серебристый)
Возможна покраска панелей порошковой краской

Стандартные цвета передних панелей:

RAL 3004

RAL 5015

RAL 6018

RAL 6027

Анодированного
алюминия
(светло-серебристый)

Цвет профиля:

Анодированного
алюминия
(светло-серебристый)

Цвет полок:

RAL 9006