


## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### ИНФУЗИОННЫЕ СТОЙКИ

Для инфузионных насосов и капельниц

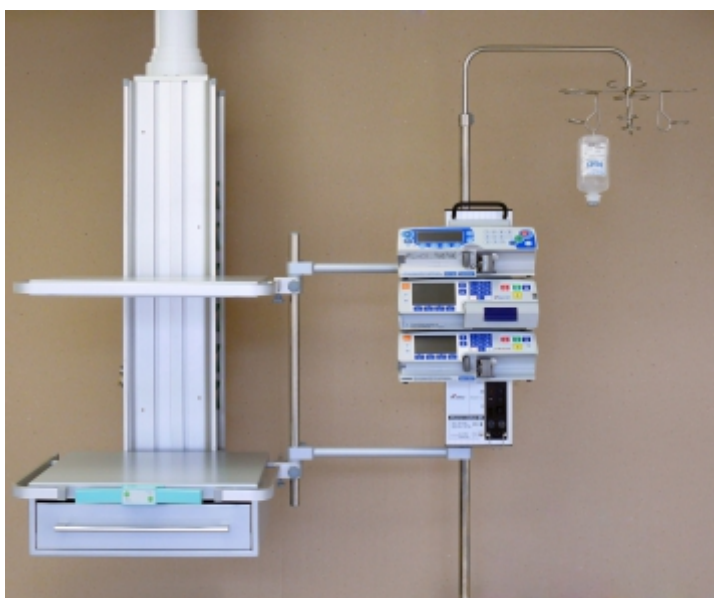

#### M-IS16

- Для 4-ех пакетов жидкости
- До 6-ти инфузионных насосов
- Материал - нержавеющая сталь
- Устанавливаемые на рельсах
- Регулировка высоты
- С поворотными плечами различной длины - до 500 мм
- Держатели капельниц удалены от оси крепления инфузионных насосов на 200 мм с поворотом на 360°
- Максимальная нагрузка - 20 кг

#### Передвижной штатив для консолей типа „МОСТ“

- Для 4-ех пакетов или бутылей инфузионной жидкости
- Материал - нержавеющая сталь
- Устанавливаемые на специальной линейной рельсовой системе с дополнительными рельсами для аксессуаров
- Регулировка высоты держателя капельниц
- С поворотными плечами различной длины - до 500 мм
- Максимальная нагрузка - 25 кг



Держатель капельниц для палатных прикроватных консолей



Стойка для инфузوماتов с креплением на рельс

## РЕЛЬСЫ ДЛЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### M-RL


- Настенные рельсы для навесного оборудования
- Стандартные размеры 10 x 25 мм
- Допустимая нагрузка 40 кг/м
- Конструкция из нержавеющей стали



Для установки на профиле прикроватной консоли



Для различного навесного оборудования с фиксацией на штативе Ø 25, Ø 32, Ø 38

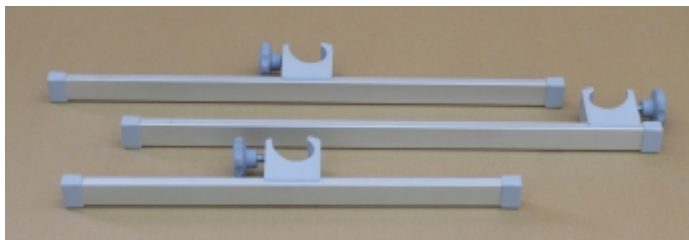

## МЕЖКРОВАТНЫЕ ШИРМЫ



M-BS05T

- Типы держателей:
  - телескопический M-BS05T
  - потолочный профиль M-BS05C
- Различной длины и высоты держателей и полотен ширмы
- Легкая очистка
- Полотно ширмы - из негорючего и легко стираемого материала
- Крепление телескопической ширмы:
  - к стене
  - на рельсы 25 x 10 мм
- К несущему потолку со специальным профилем



M-BS05C

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ




### Подвижная система для консолей M-GM типа „МОСТ“

- Подвижная система, с возможностью перемещения вдоль консоли и вращения вокруг своей вертикальной оси, с отдельной полкой, переставляемой по высоте
- С тормозом передвижения
- Полки изготовлены из алюминия, окрашены порошковой краской цвета „металлик“ RAL 9006
- Размеры могут быть стандартные или по индивидуальному заказу
- Устойчива к различным чистящим средствам
- Максимальная нагрузка - 80 кг/на полку

### Подвесная полка с одним или двумя ящиками для настенных консолей M-GB и M-PB

- Из алюминия, окрашенного порошковой краской с верхней полкой из нержавеющей стали
- Удобные для очистки - без острых кромок
- Оперативное крепление к профилю консоли
- Устойчива к различным чистящим средствам

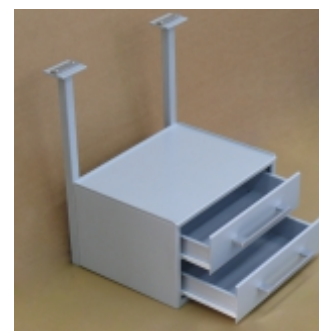

### Полка с ящиком для потолочных консолей M-GL



- Два рельса 10 x 25 мм для навесного оборудования
- Ручка для управления пневмонотормозами консолей
- Изготовлена из алюминия, окрашенного порошковой краской цвета „металлик“ RAL 9006
- Размеры могут быть стандартные или по индивидуальному заказу
- Устойчива к различным чистящим средствам

### Полка для потолочных консолей M-GL


- Рельс 10 x 25 мм для навесного оборудования
- Возможность регулирования по высоте крепления
- Изготовлена из алюминия, окрашенны порошковой краской цвета „металлик“ RAL9006
- Размеры могут быть стандартные или по индивидуальному заказу
- Устойчива к различным чистящим средствам





### Держатель для монитора с креплением „VESA“

- Для всех размеров мониторов, крепяемых к консолям
- Максимальная нагрузка 17 кг
- Длина плеча до 500 мм
- Регулировка положения монитора - по трем осям

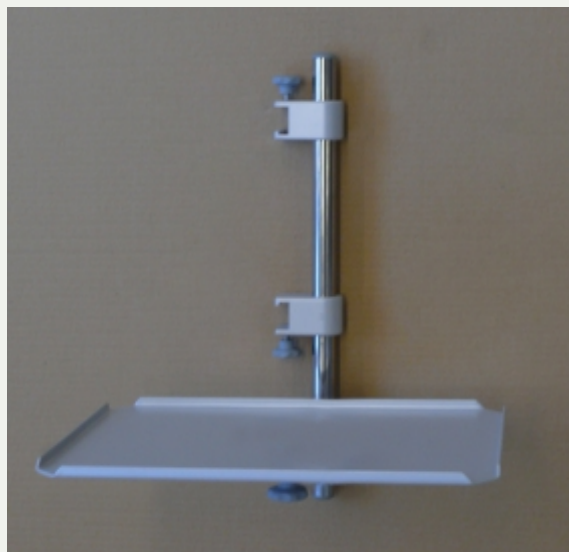

### Полка монитора для консоли интенсивной терапии

- Удобное крепление полки по всей длине консоли
- Регулировка по высоте
- Крепление к рельсу 10 x 25 мм
- Изготовлена из алюминия, окрашена порошковой краской цвета металлик
- Размеры могут быть стандартные или по индивидуальному заказу
- Устойчива к различным чистящим средствам
- Вариант - модель с выдвигающим ящиком

### Полка монитора прикроватной консоли

- Удобное крепление полки по всей длине консоли
- Изготовлена из алюминия, окрашена порошковой краской цвета „металлик“ RAL 9006
- Размеры могут быть стандартные или по индивидуальному заказу
- Устойчива к различным чистящим средствам

